




Γρήγορος Οδηγός Χρήσης



SMART SCALE
8 in 1

Model: HSCALE2

Συσκευή

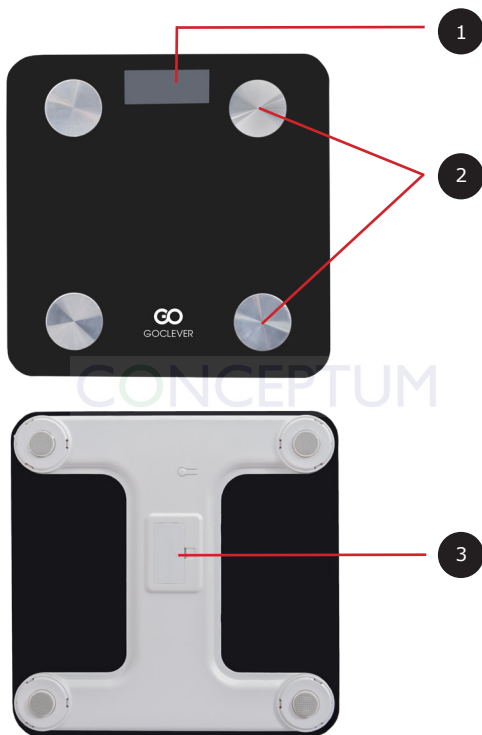

1. Οθόνη LCD
2. Ηλεκτρόδιο
3. Χώρος μπαταρίας

Ξεκινώντας

1. Σαρώστε το QR code που βρίσκεται πάνω στη συσκευασία για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή "ΟΚΟΚ" στο κινητό σας.
2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth και την εφαρμογή στο κινητό σας. Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο είναι ενεργοποιημένα κατά τη διαδικασία σύζευξης.
3. Ανεβείτε πάνω στην ζυγαριά.



4. Αν είναι η διαδικασία ήταν επιτυχής, αυτό το εικονίδιο  θα εμφανιστεί στην εφαρμογή.

Καθημερινή μέτρηση.

1. Η ζυγαριά θα ενεργοποιείται αυτόματα, όταν ανεβαίνετε πάνω με γυμνά πόδια.
2. Σταθείτε σταθερά και διατηρήστε πλήρη επαφή με τα ηλεκτρόδια.
3. Όταν η ζυγαριά είναι σωστά συνδεδεμένη, με bluetooth, με το κινητό σας, και το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο, η μετάδοση των δεδομένων θα γίνεται αυτόματα.



Προσοχή! ABA (Ανάλυση Βιοηλεκτρικής Αντίστασης)

Η GOCLEVER SCALE διοχετεύει μια μικρή ποσότητα, ασθενούς(λιγότερο από 1mA) ροής ρεύματος μέσα από το ανθρώπινο σώμα, έτσι ώστε να ανιχνεύει τη βιοσύνθεση και να υπολογίζει, κατά προσέγγιση, το σωματικό λίπος. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι όποιος διαθέτει φορητό ή εμφυτεύσιμο ιατρικό ηλεκτρονικό όργανο, όπως **βηματοδότη, πρέπει να αποφεύγει τη χρήση αυτής της συσκευής.**

Αποποίηση ευθυνών.



Λάβετε υπόψη σας, ότι αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε ένας ενήλικας, να μπορεί να κάνει μέτρηση του σωματικού του βάρους και να παρακολουθεί το σωματικό του λίπος. Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από τη συσκευή αυτή, δεν έχει σκοπό να θεραπεύσει ή να αποτρέψει οποιαδήποτε ασθένεια από το να συμβεί. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από κανέναν που είναι χρόνια ασθενής, πάσχει από ασθένεια ή παίρνει φάρμακα που επηρεάζουν τα επίπεδα του νερού του σώματός του.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η GOCLEVER Ltd. δηλώνει με δική της ευθύνη ότι το προϊόν GOCLEVER SMART SCALE 8 in 1 (HSCALE2) συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των παρακάτω Οδηγιών που δηλώνονται:

EMC DIRECTIVE 2004 / 108 / EC

R&TTE DIRECTIVE 1999 / 5 / EC

RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU



Το πλήρες έγγραφο με λεπτομερείς πληροφορίες διατίθεται στην ιστοσελίδα μας: www.goclever.com

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού). (Εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα χωριστής συλλογής). Η σήμανση αυτή δηλώνει ότι στο τέλος της διάρκειας ζωής του δεν πρέπει να απορρίπτεται αυτό το προϊόν με άλλα οικιακά απορρίμματα στην ΕΕ. Για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την υγεία του ανθρώπου από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, διαχωρίστε τα από άλλα είδη αποβλήτων και ανακυκλώστε με υπευθυνότητα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να απορρίψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, επικοινωνήστε με τον δήμο ή τον κατάλληλο οργανισμό ανάλογα την περιοχή σας. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση και σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού).

GO
GOCLEVER
INFINITE INVENTION

CONCEPTUM

Χάμιλτον 3 - 104 34 - Αθήνα

support@conceptum.gr

www.conceptum.gr

Οι φωτογραφίες/διαγράμματα/χρώματα που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης και τη συσκευασία είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν στο προϊόν.

Copyright©2017 Εγχειριδίου Χρήσης κι Μενού:

Conceptum A.E.

*Απαγορεύεται η χρήση/αναπαραγωγή του παρόντος ως σύνολο ή τμηματικά ή των κειμένων μερικώς ή ολικώς χωρίς τη γραπτή συναίνεση της
Conceptum A.E.*